




# DRIVESAFE™

ETHYLOTEST ELECTRONIQUE

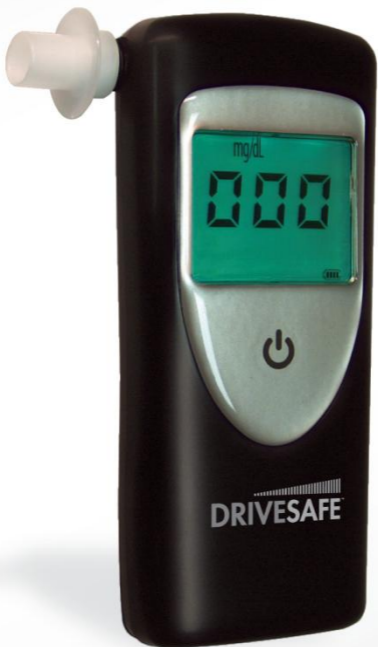

ACS



ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

Guide de l'utilisateur



Merci d'avoir acheté le Drivesafe – un éthylotest qui mesure le niveau d'alcool dans le souffle humain. Votre achat démontre votre souci en matière de risques liés à l'ingestion d'alcool.

Selon votre juridiction, votre Drivesafe se présente avec des niveaux prédéfinis qui indiquent si le résultat du test d'alcoolémie dans l'air expiré est considéré comme un échec (rétro-éclairage rouge), un avertissement (rétro-éclairage orange) ou un succès (rétro-éclairage vert).

*Remarque : l'alcool peut mettre jusqu'à une heure pour être complètement absorbé après le moment où il a été consommé.*

## **Sécurité & Précautions**

Veillez prendre les précautions suivantes afin d'assurer une utilisation en douceur et sans interruption de votre éthylotest:

- Utilisez uniquement ce produit aux fins qui lui ont été destinées.
- Utilisez uniquement des piles alcalines AA.
- Ne pas conserver dans un lieu extrêmement chaud ou froid et évitez d'exposer le Drivesafe aux rayons directs du soleil pour une durée prolongée.
- Ne pas souffler de fumée ou de liquide dans l'embout buccal, car cela pourrait endommager le capteur.
- Ne pas ouvrir le boîtier de l'éthylotest. Ceci annulerait la garantie et pourrait aussi endommager les composants internes.

- Veuillez garder tous vos appareils magnétiques ou à ondes (ex : téléphones mobiles) à distance de l'éthylotest afin de minimiser les interférences de fréquences radio.
- La température de fonctionnement pour l'éthylotest est comprise entre 0°C et +50 °C.

## **Garantie**

Tous les produits ACS sont garantis contre tout vice de pièces et de main d'œuvre pour une période d'un an à partir de la date d'achat.

ACS s'engage à remplacer ou à réparer tout éthylotest défectueux, sous réserve que le défaut ne soit pas dû à une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation.

Les éthylotests retournés pour réparation sous garantie doivent être proprement emballés et expédiés aux frais de l'utilisateur vers un prestataire de service agréé.

Coordonnées pour les demandes de service:

Email: [service@acs-corp.com](mailto:service@acs-corp.com)

Website: [www.acs-corp.com](http://www.acs-corp.com)

Téléphone: 1-877-227-7112

## **Entretien**

Nettoyez votre éthylotest avec un linge humide et un savon doux. Ne pas utiliser de produit d'entretien abrasif ni de dissolvant. Conserver dans un endroit sec et éviter les températures extrêmes.

Le Drivesafe nécessite un entretien et un étalonnage périodiques. Il est recommandé d'étalonner l'éthylotest une fois par an ou après 5.000 tests, selon que l'un ou l'autre arrive en premier. L'étalonnage doit être effectué par un professionnel de service agréé. L'écran affiche un message clignotant **CAL** quand l'éthylotest a besoin d'être étalonné. Un entretien et un étalonnage périodiques sont obligatoires. Veuillez contacter ACS pour de plus amples informations. Le fait de ne pas suffisamment étalonner l'éthylotest peut aboutir à des lectures erronées.

# Table des Matières

---


Démarrer	1
Allumer / Eteindre	2
Piles	2
Faire un test de souffle	3
Dépannage	5
Index	7

## Démarrer

---

Le Drivesafe est un éthylotest personnel qui est précis et facile à utiliser. Il mesure la concentration d'alcool dans l'air expiré, qui est directement proportionnelle à votre concentration d'alcool dans le sang. Le Drivesafe est doté d'un seul bouton, ce qui le rend facile d'utilisation.

Cette section vous permet de vous familiariser avec les pièces et les fonctions de base de l'éthylotest.

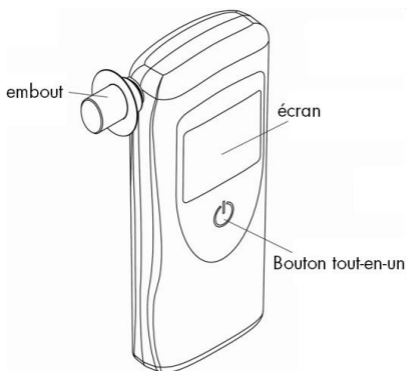

## Allumer / Eteindre

Veillez appuyer sur le bouton du pour allumer le Drivesafe. Lorsque l'éthylotest passe par une séquence de démarrage, vous verrez un message **WAIT** qui clignote à l'écran (pendant approximativement 3 secondes). Un rétro-éclairage avec un message **READY** à l'écran indique que l'éthylotest est prêt pour une utilisation.

Appuyer deux fois sur le bouton de manière rapide et successive pour éteindre l'éthylotest manuellement. Sinon, l'éthylotest s'éteint automatiquement après 45 secondes d'inactivité.

Si vous allumez le Drivesafe pour la première fois, retirer l'onglet en plastique du compartiment des piles. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le couvercle des piles pour retirer l'onglet.

IMPORTANT: Veuillez éteindre l'éthylotest *avant* d'enlever les piles car cela pourrait affecter le calibrage.

## Piles

L'éthylotest nécessite deux piles alcalines "AA" de manière à fonctionner. Pour l'insertion, enlever le couvercle arrière en le soulevant. L'éthylotest peut réaliser jusqu'à 1.000 tests avec un lot de piles neuves. L'indicateur en bas à droite de l'affichage indique le niveau de piles restant.

Lorsque l'indicateur de piles commence à clignoter à l'écran, vous devriez changer de piles. Vous pouvez néanmoins continuer à utiliser l'éthylotest.




Si vous voyez le message d'erreur **E01**, vous aurez besoin de changer les piles avant de pouvoir effectuer un autre test de souffle.

## Faire un test de souffle

---

*Remarque: Certaines substances peuvent interférer sur le résultat (par exemple la fumée de cigarette). Attendre au moins 10 min après la dernière ingestion d'alcool, avant d'effectuer une mesure pour fiabiliser le résultat.*

1. Reliez l'embout buccal au Drivesafe. Pour assurer des résultats précis, utilisez un nouvel embout à chaque fois. Un embout buccal utilisé peut être contaminé par des tests antérieurs qui peuvent aboutir à des lectures erronées.

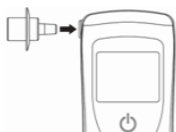

2. Allumez l'éthylotest en appuyant sur le bouton. Vous verrez un message **WAIT** qui clignote, lorsque l'éthylotest passe par la séquence de démarrage. Un message **READY** à l'écran indique que l'éthylotest est prêt.
3. Prenez une grande inspiration et soufflez dans l'embout buccal de manière modérée, et à une vitesse et pression constantes. Vous devriez entendre un bip continu, indiquant un débit de souffle adéquat.



*Remarque: Si l'échantillon de souffle est intermittent, trop fort ou trop faible, vous entendrez deux bips avec un message **ABORT** à l'écran. Attendez le message **READY** et soufflez encore.*

**4.** Arrêtez de souffler lorsque vous entendez le petit bruit sec et que la tonalité s'arrête (après approximativement 5 secondes). Cela indique que le processus d'échantillonnage est achevé.

**5.** L'éthylotest analyse et affiche les résultats. Le temps mis (quelques secondes) dépend de la quantité d'alcool présent dans l'échantillon de souffle et de la température environnante.



# Dépannage

Si:	Solution:	Voir page
l'éthylotest ne s'allume pas	Si vous l'utilisez pour la première fois, retirer le petit onglet en plastique du compartiment à piles	3
l'éthylotest affiche des résultats irréguliers	<ul style="list-style-type: none"><li>• Changez l'embout buccal. Utiliser le N° de pièce 95-000145, pour commander d'autres embouts à ACS</li><li>• <i>Si vous avez mangé ou fumé avant de faire le test, rincez-vous la bouche, attendez au moins 20 minutes et répétez le test</i></li><li>• <i>Vérifiez si le message <b>CAL</b> clignote à l'écran. Ceci indique qu'un étalonnage est dû. Bien que vous puissiez continuer à utiliser l'éthylotest pour effectuer des tests, il est fortement recommandé que vous envoyiez immédiatement l'éthylotest pour étalonnage</i></li></ul>	3
CAL clignote à l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Votre Drivesafe doit être étalonné. Contactez un centre de service.</li><li>• Le Drivesafe devrait être étalonné chaque année à partir de la date de première utilisation ou après chaque</li></ul>	iii

Si:	Solution:	Voir page
	<p>tranche de 5.000 tests, selon que l'une ou l'autre arrive en premier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous enlevez les piles sans éteindre l'éthylotest, il se peut que vous voyiez CAL clignoter même si l'éthylotest n'a pas à être calibré</li> </ul>	
l'éthylotest a un embout buccal bouché ou sale	Changez l'embout Utilisez le n° de pièce 95-000145, pour commander d'autres embouts à ACS	3
l'éthylotest affiche le code erreur E01	Changez de piles. L'éthylotest n'atteindra pas l'état ready à moins que vous ne changiez de piles.	2
l'éthylotest affiche ces codes erreur: E02, E03, E03, E04, E05, E06, E07, E08	Ces erreurs peuvent survenir pendant la séquence de mise sous tension et indiquent que l'éthylotest nécessite une visite de service. Contactez ACS pour la procédure de retour	iii

# Index

---

Allumer, 2

Démarrer, 1

Dépannage, 5

Entretien, ii

Eteindre, 2

Garantie, ii

Piles, 2

Test, 3



ACS Part Number 60-000159-A  
Copyright © 2010